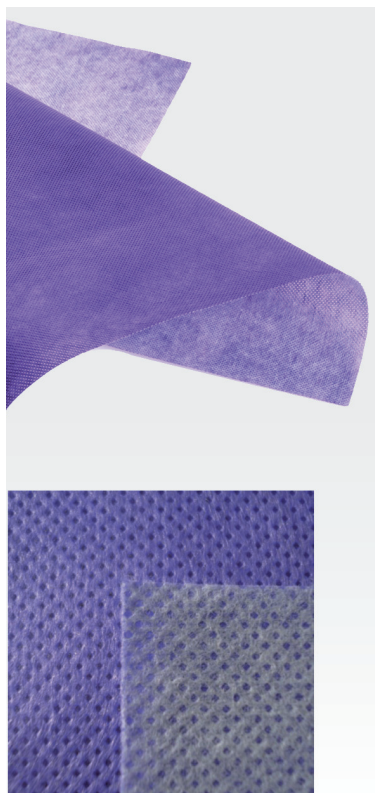




CB/TDRY®

SMS Confort®

- Le SMS Confort® est un nouveau SMS particulièrement souple permettant un emballage de qualité grâce à sa résistance exceptionnelle et de drapabilité remarquable.
- Le SMS Confort® a un poids de 53 gr/m². Conforme aux normes ISO 11607-1 et EN 868-2, il est l'emballage externe par excellence du système d'emballage stérile en association avec un crêpe ou un non tissé. Il peut également être utilisé comme emballage interne.
- Le SMS Confort® est hydrophobe.

Wrap Dry®

La solidité d'un emballage de plateau lourd est primordiale. Malheureusement, plus on renforce la solidité, plus on pénalise la pénétration de la vapeur à travers l'emballage et, de ce fait, la rétention des excès de condensats.

- **Wrap Dry®** (emballage sec) est constitué d'un matériau exclusif hyper résistant en polypropylène, associé à une couche hydrophile favorisant la vaporisation des excès de condensats durant la phase de stérilisation.
- Plus résistante qu'un SMS, cette feuille de 75g/m² est caractérisée par une couleur violette pour indiquer qu'elle ne constitue pas une barrière stérile. Elle doit toujours être associée à une feuille barrière stérile afin de respecter les normes ISO11607-1 et EN 868-2.

- Interfoliage double SMS destiné à la **stérilisation vapeur uniquement**.

Réf. interfoliage	Tailles/cm	Unités
CB/TDRY060	60 x 60	350
CB/TDRY075	75 x 75	300
CB/TDRY090	90 x 90	300
CB/TDRY100	100 x 100	200
CB/TDRY120	120 x 120	120

- Interfoliage double SMS pour stérilisation vapeur et **basse température** feuille CB/TWO (orange).

Références	Tailles/cm	Unités
CB/TWO060	60 x 60	350
CB/TWO075	75 x 75	300
CB/TWO090	90 x 90	300
CB/TWO100	100 x 100	200
CB/TWO120	120 x 120	120



STEAM

EO

MD

